



AESTHETICS



BTL EXILITE™



ventas@btlnet.com
www.btlaesthetics.com

Todos los derechos reservados. Bien que se ha tenido cuidado para proporcionar información precisa y actualizada al día, no será aceptada ninguna responsabilidad por las equivocaciones o errores de imprenta contenidos en este catálogo. Los productos y sus especificaciones, como se muestra en este catálogo, pueden diferir según el país donde se venden.

BTL EXILITE™

OLVÍDESE DEL
PELIGRO

EL ALMA DE LA PERFECCIÓN



BTL EXILITE™ ES UN SISTEMA EXCLUSIVO DE LUZ PULSADA INTENSA QUE PROPORCIONA EXCELENTES RESULTADOS. SU TECNOLOGÍA DE PUNTA PERMITE UN TRATAMIENTO RÁPIDO Y CÓMODO.



EL ESPÍRITU DE LA **EFICIENCIA**



VIDA ÚTIL **SUPERIOR**

El BTL EXILITE™ ofrece una larga duración de la lámpara de flash. El retorno de la inversión se maximiza debido a los costos reducidos de operación.

POTENCIA **IMPRESIONANTE**

Los excelentes resultados clínicos están asegurados por la salida de energía alta. La fluencia de BTL EXILITE™ alcanza a 40 J/cm².

ALTA FRECUENCIA DE REPETICIÓN

Tanto el paciente como el operador se benefician de la terapia más rápida. Incluso las áreas grandes, como la espalda, son tratados en un instante.

REFRIGERACIÓN **TERMOELÉCTRICA** EN EL SPOT DEL CRISTAL DE ZAFIRO


Gracias al spot de zafiro, el sistema avanzado de refrigeración hace que la terapia sea suave en la piel.

FILTROS **DE FÁCIL CONEXION**

El cambio de los filtros de BTL EXILITE™ es rápido y fácil. El sistema estará listo para otra indicación dentro de pocos segundos.




SAQUE EL MÁXIMO PROVECHO DE LA VERSATILIDAD

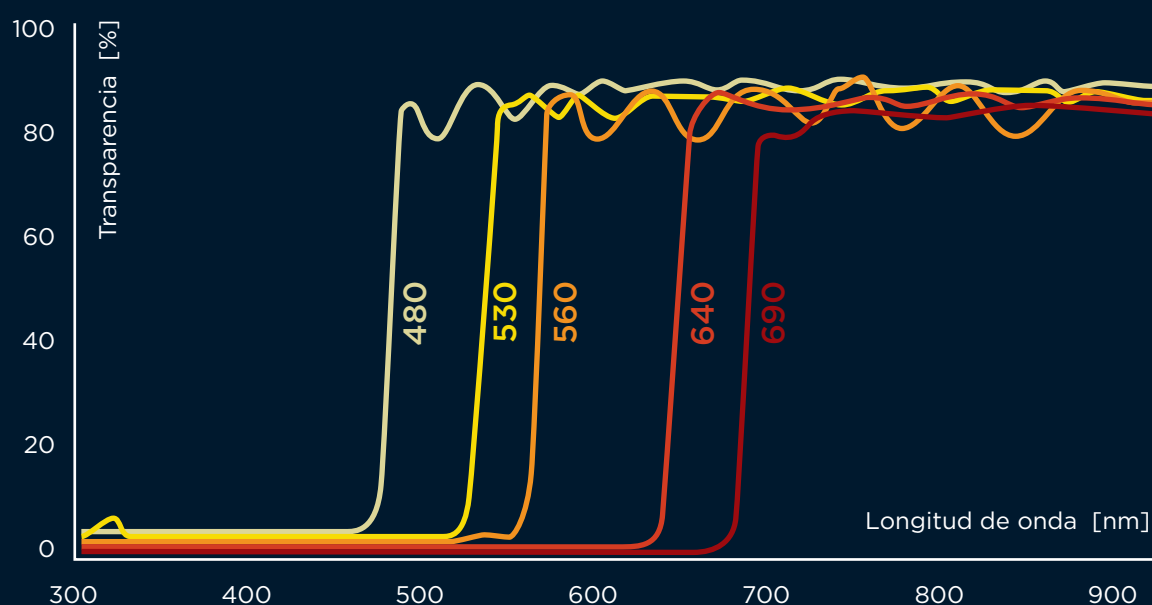


DISTRIBUCIÓN UNIFORME DE LA LUZ

Las placas de oro reflejan la energía dispersada con el fin de difundirla de manera uniforme por todo el spot de tratamiento. Esta característica es fundamental para el logro de resultados óptimos de la terapia.

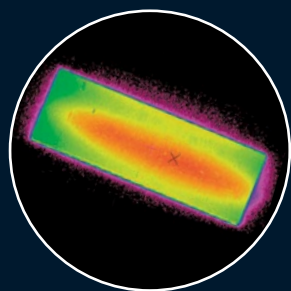


Distribución de la energía de la luz
pusada intensa común

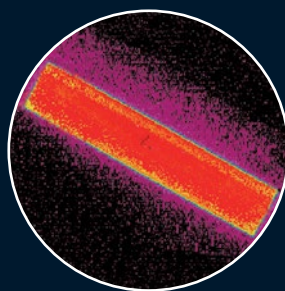

Distribución de la energía en el sistema
BTL EXILITE™


FILTROS DE ALTA PRECISIÓN

DETERMINAN EL ESPECTRO DE LUZ REQUERIDO PARA TRATAR UNA AMPLIA GAMA DE INDICACIONES ESTÉTICAS.

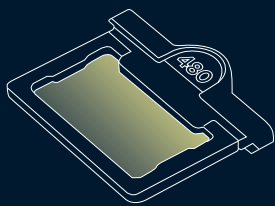


Filtro
480 nm

Reducción
del acné

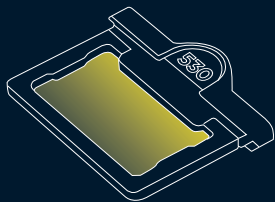


Filtro
530 nm

Tratamiento
de la
pigmentación

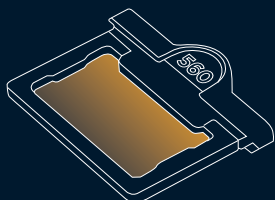


Filtro
560 nm

Lesiones
vasculares
Tratamientos de
rejuvenecimiento
de la piel

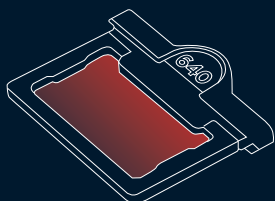

Filtro
640 nm


Depilación
Fototipos claros

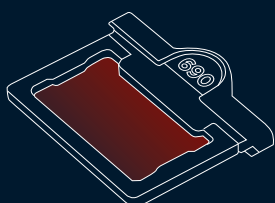

Filtro
690 nm

Depilación
Fototipos oscuros

ALTA POTENCIA IMPECABLEMENTE ENTREGADA

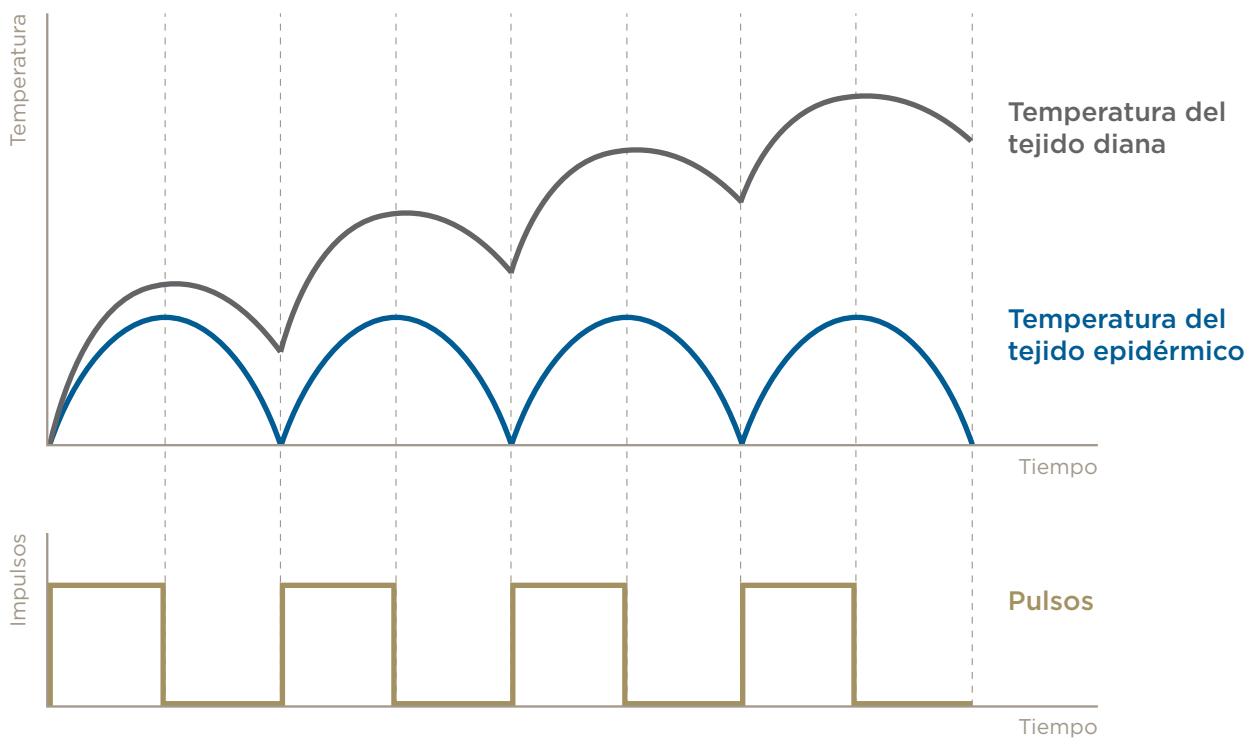

EL MODO MULTIPULSO INTELIGENTE

El modo de multipulso de BTL EXILITE™ permite la transmisión sumamente suave de la energía en la piel, alcanzando excelentes resultados incluso en pacientes con menos diferencia de pigmento en el tejido a tratar. El modo de multipulso aumenta el efecto de la aplicación disminuyendo en el mismo tiempo el riesgo de eventos no deseados, tales como el enrojecimiento.

RESULTADOS VISIBLES **DURADEROS**



POSTLIGHT™



El BTL EXILITE™ ofrece una excelente herramienta para acelerar la regeneración de la piel usando el principio de efecto no térmico de la tecnología LED de luz modulada.

Este método probado científicamente reduce sustancialmente el eritema, mejora la regeneración de la piel y estimula positivamente la producción de colágeno en el tejido.



EL PROGRESO

NUNCA SE

DETIENE

FLUENCIA HASTA **40 J/CM²**

DURACIÓN DE VIDA DE LA LÁMPARA DE
FLASH **200,000 PULSOS**

FRECUENCIA DE REPETICIÓN HASTA **3 HZ**

REFRIGERACIÓN TERMOELÉCTRICA

LONGITUD DEL PULSO HASTA **240 MS**

FUNCIONAMIENTO CON UNA ÚNICA PIEZA
DE MANO

FILTROS **480, 530, 560, 640, 690 NM**

SPOT DE ZAFIRO

11 MM × 40 MM



